

LANAFORM

Home Health Experience

Skin Mass

MASSAGEAPPARAAT TEGEN CELLULITIS



* Massage door kneden en rollen * Vermindert sinaasappelhuid * Een gladdere en stevigere huid





Le Skin Mass **De oplossing voor cellulitis**

Skin Mass, het massage-apparaat dat cellulitis vermindert en zorgt voor een strakker figuur


Door de combinatie van kneed- en rolmassage en het aspiratiesysteem met verschillende sterktes zorgt de Skin Mass voor een vermindering van uw cellulitis, een strakker figuur en een elastischere huid.



Wat is kneed- en rolmassage?

Kneed- en rolmassage is al een flink aantal jaren een cultmethode op het gebied van afslanken. Deze techniek, waarbij cellulitis effectief wordt "gebroken", bevordert lipolyse, dat wil zeggen vernietiging van vetcellen zodat de "sinaasappelhuid" minder wordt.

Het resultaat? **een gladdere en stevigere huid.**

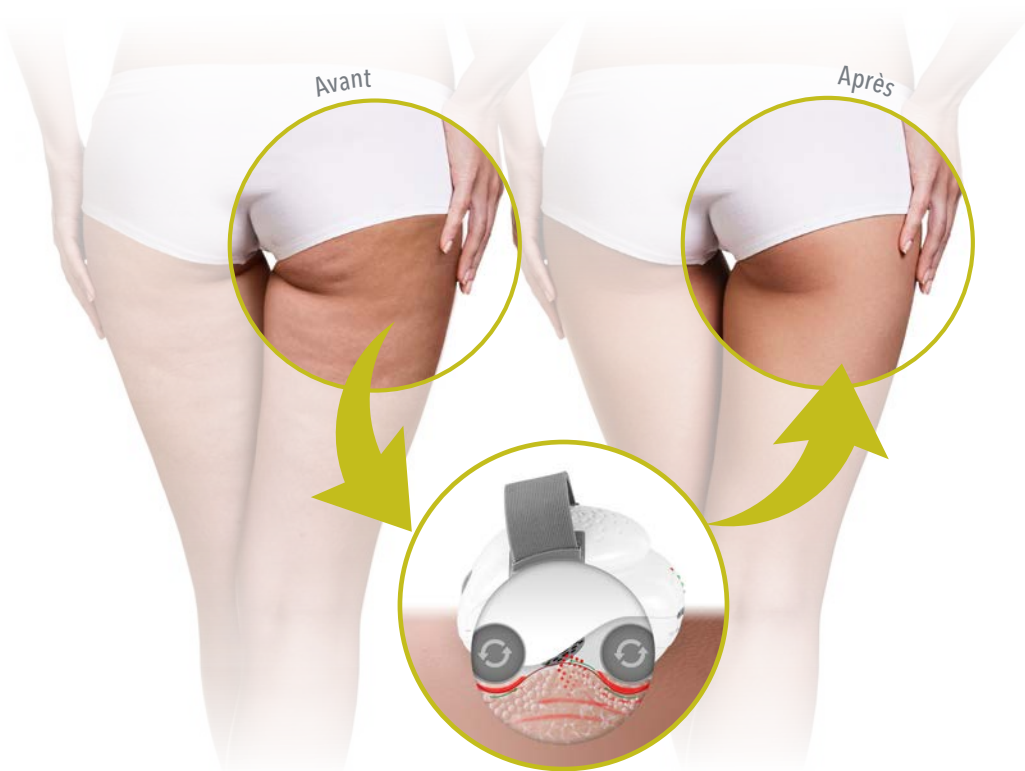

Kneed- en rolmassage: hoe werkt dat?

Bij kneed- en rolmassage (of knijp- en rolmassage) wordt de huid vastgepakt op plaatsen waar zich cellulitis bevindt en wordt er vervolgens een rollende beweging gemaakt zodat de huid over zichzelf heen rolt.

Deze massagemethode bevordert lipolyse, dat wil zeggen de vernietiging van vetcellen die de basis vormen van cellulitis. De doorbloeding wordt beter, de huid wordt soepeler, strakker en de sinaasappelhuid wordt effectief minder.

Le Skin Mass, de oplossing voor cellulitis

De Skin Mass is een massageapparaat waarbij de kneed- en rol-techniek wordt nagebootst. Door de twee rollen wordt de huid achtereenvolgens gekneet en gerold waardoor de cellulitis krachtiger en sneller wordt gebroken dan bij een manuele massage.

Doordat de sterkte van de aspiratiefunctie in te stellen is, kan de sterkte worden aangepast aan de te behandelen zone en het type huid (gevoelig of niet gevoelig)


De Skin Mass heeft drie modi die u na elkaar kunt toepassen als een routine of die u afzonderlijk kunt toepassen.



3 MODES

Rotatie van de rollen


Bereid je huid voor

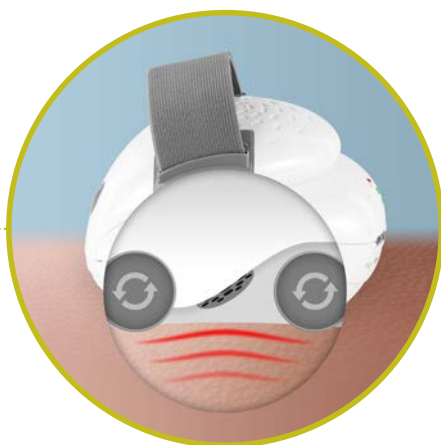

1

Rotatie van de rollen + Aspiratie


Breekt cellulitis af

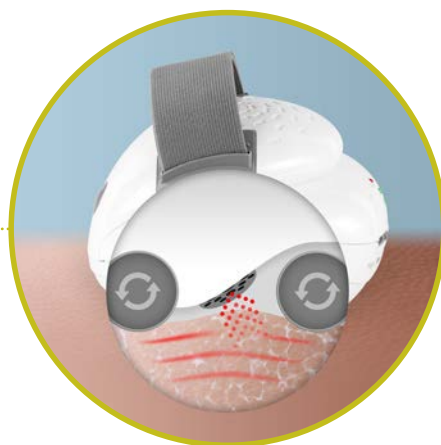

2

Rotatie van de rollen + Aspiratie + Vibratie

Verzacht en draineert de huid

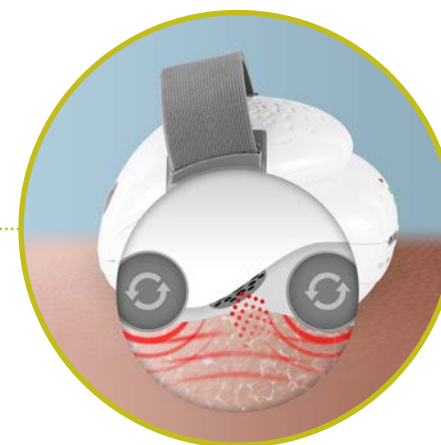

3

In de praktijk

Om snel zichtbare resultaten te krijgen, verdient het aanbeveling om de Skin Mass dagelijks te gebruiken op de te behandelen zones.

De Skin Mass is gemakkelijk in gebruik en biedt een volledige en professionele behandeling van uw huid in uw eigen badkamer.

U kunt het apparaat gebruiken op alle zones waar sprake is van cellulitis*:

- Dijen (binnenkant en buitenkant)
- Billen
- Benen
- Knieën
- Buik
- Armen



LANAFORM

Gebruiksaanwijzing

Ook beschikbaar

English, Français, Nederlands, Deutsch, Español, Italiano, Slovenčina, Slovenščina, Hrvatski, Русский Язык, Български:

www.bit.ly/skinmass



⚠ Waarschuwing

Indien u ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Cell Roller en raadpleeg uw arts.

Gebruik op de buik en de taille

Zet u comfortabel met een rechte rug. Plaats de Cell Roller op uw buik en trek uw buik lichtjes samen. Maak langzame bewegingen over de hele buik, en laat het toestel op elk gebied werken. U kunt ook beginnen in het midden van uw buik en in een rechte lijn naar elke kant gaan. Om de bovenkant van de heupen te bewerken, beweeg heen en weer aan elke kant zoals aangegeven op het schema.

Herhaal een van deze bewegingen verschillende keren. Na meerdere keren kunt u ook kiezen voor de hogere intensiteit voor meer resultaat in minder tijd, afhankelijk van uw huid en hoe u zich voelt bij het gebruik van de Cell Roller.

Gebruik op de benen

Voor een effectieve massage van de benen, leunt u lichtjes achterover en plaatst u de Cell Roller net boven de knieën. Maak langzame bewegingen op de voor- en achterkant van uw dijen tot u uw liezen en heupen bereikt. Wissel het ene been af en dan het andere. De massage mag niet langer dan 5 minuten per been duren.



armen

men te krijgen, maakt er naar boven op de uw armen.



* Het apparaat wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing met alle mogelijkheden van het apparaat.



Skin Mass

HET MASSAGEAPPARAAT TEGEN CELLULITIS

LA11022002

Kenmerken

- Voor de bestrijding van cellulitis en sinaasappelhuid
- Kneed- en rolmassage voor een stevigere en gladdere huid
- Stimuleert de bloed- en lymfecirculatie
- Geschikt voor de dijen, armen, buik en billen
- Krachtige motor voor een energieke kneed- en rolmassage.
- Variabele massagesterkte
- 2 massagerollen
- 3 massage modi
- Elastische en verstelbare handgreep
- Ergonomisch ontwerp voor een gemakkelijk en handig gebruik





Afmetingen Master Carton
49.0 × 24.5 × 50.5 cm



Gewicht Master Carton
10.10 kg



Colour Boxes / Master Carton
12



Afmetingen Colour Box
15.3 × 21.5 × 12 cm



Gewicht Colour Box
0.8 kg

LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55
4141 Louveigné, Belgique

Tel. : +32(0)4 360 92 91

Fax: +32(0)4 360 97 23

www.lanaform.com

info@lanaform.com

