

LANAFORM

Limpia

ZUIGTOESTEL VOOR MEE-ETERS



LANAFORM
Limpia



Een complete huidverzorging, gewoon thuis

De elektrische mee-eterverwijderaar Limpia **elimineert efficiënt puistjes en mee-eters.**

Limpia gaat de strijd aan met onzuiverheden op je huid en geeft je gezicht weer een gezonde gloed.

Het laat een gepersonaliseerde huidverzorging toe door 3 intensiteiten voor te stellen en heeft een autonomie van 65 minuten.*

*Autonomie gemeten met de hoogste intensiteit.






Kun je de drang om puistjes uit te knijpen moeilijk weerstaan?

In tegenstelling tot wanneer je puistjes met je vingers uitknijpt, elimineert Limpia meeters en onzuiverheden zonder risico op wondjes of infecties. Het geheim hierachter? Dat is de speciale **zuigtechnologie**.

Deze bevrijdt je snel van imperfecties en sluit de poriën in je huid weer.

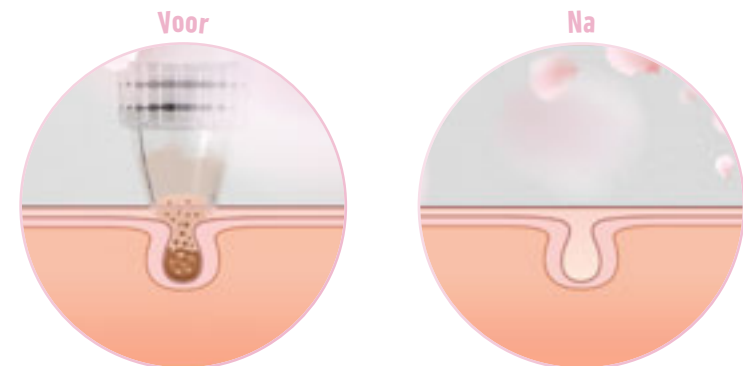

Een complete huidverzorging, gewoon thuis

Dankzij de vijf accessoires verwen je jezelf
thuis met een complete huidverzorging.



Verwijder onzuiverheden moeiteloos met drie verschillende koppen

Neus



De kleine kop is handig
voor moeilijk bereikbare
plekjes, zoals de neus.

Wangen en Voorhoofd



Het zuigoppervlak van
de middelgrote kop is
ideaal voor de wangen
en het voorhoofd.

Vette Huid



De grote kop is speciaal
ontworpen voor gebruik
op een vette huid en zuigt
overtollige talg weg.

Anti-aging



De langwerpige kop is perfect
voor anti-agingbehandelingen:
deze strijkt rimpels glad
en maakt je huid soepel




Dermabrasie



De dermabrasiekop
exfolieert de gezichtshuid
zacht en verwijdert
dode huidcellen.

Onze gebruikstips

We raden je aan elke behandeling tot maximaal vijf minuten te beperken. Als je een gemengde of vette huid hebt, behandel je deze één keer per week. Heb je een normale of gevoelige huid? Dan behandel je deze één keer om de twee weken.

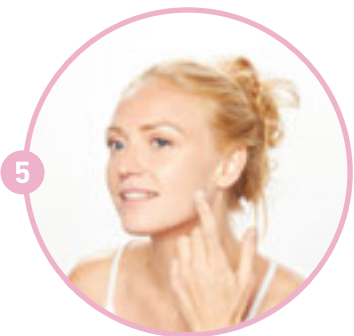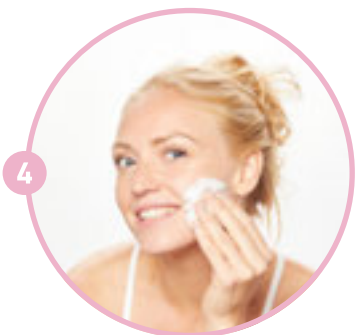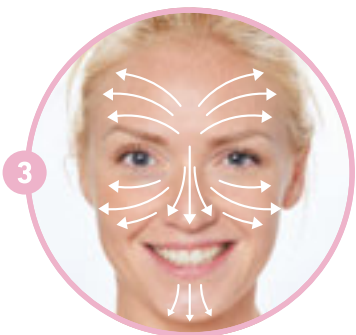

- 1 Reinig eerst je gezicht en open je poriën met een warm kompres of een gezichtsstoombad.
- 2 Kies de kop die je wilt gebruiken en zet de Limpia aan. Pas indien nodig de intensiteit aan voordat je het apparaat op je gezicht gebruikt.
- 3 Verzorg je huid.
- 4 Reinig je gezicht zorgvuldig na de behandeling.
- 5 Breng een hydraterende crème of een masker aan om je gezichtshuid te kalmeren.

Opgelet: gebruik de Limpia niet langer dan twee seconden op dezelfde plek en ga niet opnieuw over een zone die je al hebt behandeld.

LANAFORM *Limpia*

Kenmerken

- Diepe reiniging van de poriën.
- Vijf verwisselbare koppen.
- Drie intensiteiten.
- Oplaadbaar via USB.



Afmeting Master Karton
57.8 × 35.0 × 44.0 cm



Gewicht Master Karton
17.000 kg



Colour Boxes / Master Karton
50



Afmetingen Colour Box
21.0 × 10.7 × 5.8 cm



Gewicht Colour Box
0.230 kg



Spanning
5V



LANAFORM

Home Health Experience

Rue de la Légende 55
4141 Louveigné, België

Tel. : +32 (0)4 360 92 91
Fax: +32 (0)4 360 97 23

www.lanaform.com
info@lanaform.com

